

药物预警小程序 - 测试文档

测试计划

导言

目的

本文档旨在描述“药物预警”微信小程序的系统测试计划，主要包括：

测试范围与测试项目

测试方法与测试环境

测试标准（通过/失败、挂起/恢复）

测试时间计划

预期读者：开发人员、项目经理、测试人员。

范围

本文档定义了“药物预警”小程序的测试策略、测试标准和时间计划。具体的测试用例设计在本文档第二部分详细说明。

术语定义

术语	定义
小程序	运行于微信内的应用程序
云函数	运行在腾讯云上的 Node.js 函数，作为小程序后端
云数据库	微信云开发的 JSON 文档型数据库
openId	用户在微信生态内的唯一标识
AI 模型 API	用于药品识别和问答的人工智能接口

引用标准

GB/T 11457：软件工程术语

GB/T 8565-1997：计算机软件测试规范

参考资料

- 《药物预警小程序-概要设计文档》
- 《药物预警小程序-详细设计文档》
- 《药物预警小程序-API 接口文档》
- 《药物预警小程序-交互说明文档》
- 《药物预警小程序-DB 设计文档》

测试项目

测试项目背景

“药物预警”是一款帮助用户管理家庭药品有效期的小程序，核心功能包括药品录入（拍照/语音/手动）、效期预警、AI 用药建议。本次测试旨在验证系统功能的正确性、界面的易用性以及系统的健壮性。

测试要点

被测特性：

模块	被测特性
用户模块	微信授权登录、手机号登录、首次登录自动创建用户
药品录入模块	拍照录入、语音录入、手动录入、AI 识别
药品管理模块	药品列表展示、筛选（状态/开封状态）、搜索、编辑、删除
预警模块	首页风险卡片、临期/过期药品提示、剩余天数计算
AI 助手模块	AI 问答、基于药箱的智能建议

模块	被测特性
个人中心模块	数据统计、偏好设置、退出登录

不被测特性：

云函数内部代码逻辑的单元测试

AI 模型 API 的底层算法准确性（仅测试接口调用和返回格式）

微信原生组件的底层稳定性

数据库的物理安全性


测试内容

测试类型	测试内容
功能测试	登录、药品录入（三种方式）、药品管理、预警、AI 助手、个人中心
界面与易用性测试	页面布局、交互反馈、操作一致性、异常提示
兼容性测试	iOS/Android 不同版本、不同屏幕尺寸、不同微信版本
边界与异常测试	有效期边界值、网络异常、AI 识别失败、空数据状态
安全性测试	用户隔离（用户 A 不能看到用户 B 的药品）

测试方法

测试环境

系统架构图：

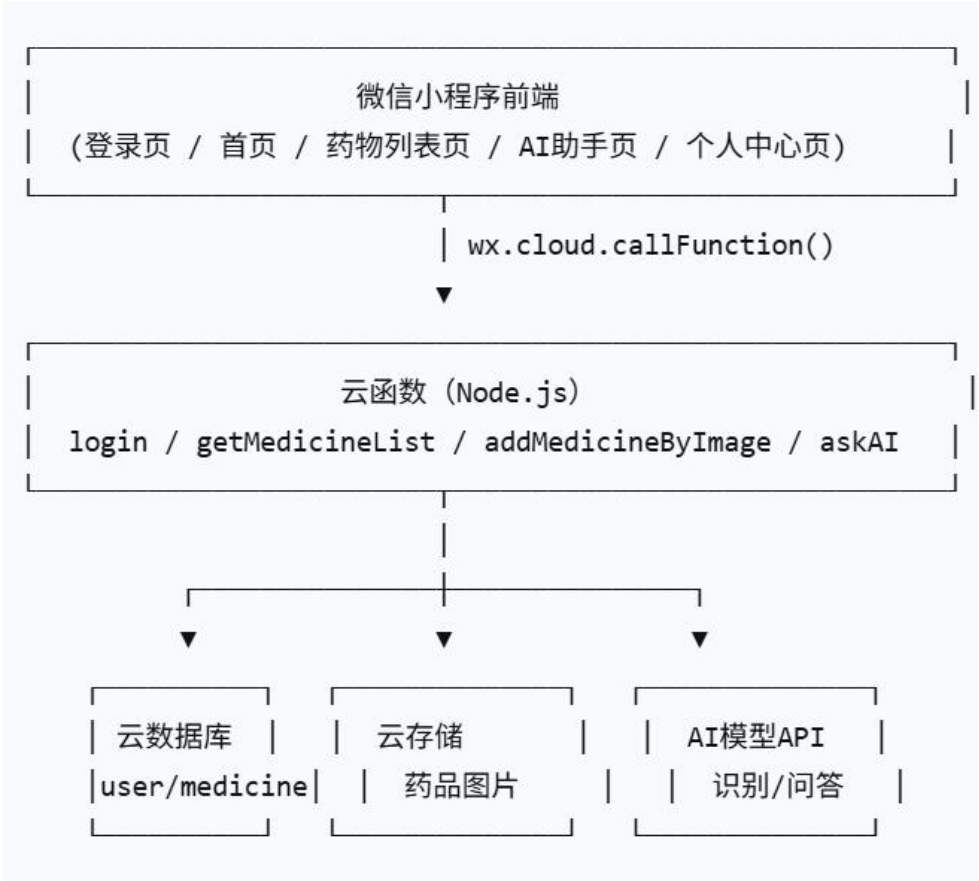

测试环境配置：

环境项	配置
客户端设备	iPhone 12 (iOS 16)、iPhone 14 (iOS 17)、小米 13 (Android 13)、华为 P40 (Android 12)
微信版本	8.0.40 及以上
网络环境	Wi-Fi、4G/5G、弱网（限速）、无网络
后端环境	微信云开发生产环境

测试方法

测试类型	测试方法	测试手段
------	------	------

测试类型	测试方法	测试手段
功能测试	黑盒测试、等价类划分、边界值分析	手工测试
界面测试	走查法、对比法	手工测试
兼容性测试	真机测试矩阵	手工测试
异常测试	错误猜测法、故障注入	手工模拟（断网、弱网等）

测试标准

缺陷严重级别

级别	名称	定义
4 级	致命	系统无法启动、核心功能完全不可用、数据丢失或损坏
3 级	严重	功能严重偏离需求、主要流程无法走通、导致应用崩溃
2 级	一般	功能部分异常、非核心流程问题、界面显示错误
1 级	提示	细微的 UI 问题、文案不准确、建议性优化

测试通过/失败标准

测试通过标准：

所有核心功能测试用例执行完成

无 3 级（严重）及以上遗留缺陷

级（一般）缺陷遗留数量不超过 5 个，且均有规避方案

测试用例通过率 ≥ 95%

测试失败/挂起标准：

发现致命缺陷导致后续测试无法继续

测试环境不可用超过 1 个工作日

需求发生重大变更未同步

测试恢复条件

致命缺陷已修复并验证通过

测试环境恢复可用

需求变更已完成同步并更新用例

测试交付物

测试计划（本文档）

测试用例（本文档第二部分）

测试报告（本文档第三部分）

缺陷记录表（附于测试报告）

测试时间计划

序号	工作任务	时间	开始日期	结束日期
1	编写测试计划	2 天	2026-03-11	2026-03-12
2	设计测试用例	5 天	2026-03-13	2026-03-17
3	执行第一轮功能测试	8 天	2026-03-18	2026-03-25
4	缺陷修复与回归测试	5 天	2026-03-26	2026-03-30

序号	工作任务	时间	开始日期	结束日期
5	执行兼容性测试	5 天	2026-04-01	2026-04-05
6	执行异常与边界测试	4 天	2026-04-06	2026-04-09
7	执行第二轮回归测试	4 天	2026-04-10	2026-04-13
8	编写测试报告	3 天	2026-05-18	2026-05-20

说明： 4 月 14 日至 5 月 17 日为预留的缺陷修复和缓冲时间。

测试用例设计

功能测试用例

用户模块测试用例

用例编号：TC-USER-001

项目	内容
模块名称	用户模块-微信授权登录
测试目的	验证用户可以通过微信授权正常登录
预置条件	小程序已安装，用户未登录
测试步骤	1. 打开小程序 2. 点击“微信授权登录”按钮 3. 在授权弹窗中点击“允许”
预期结果	1. 调用 wx.login 获取 code 2. 登录成功后跳转首页 3. 用户信息正确显示
实际结果	符合

项目	内容
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-USER-002

项目	内容
模块名称	用户模块-手机号登录
测试目的	验证用户可以通过手机号正常登录
预置条件	小程序已安装，用户未登录
测试步骤	1. 打开小程序 2. 点击“手机号登录”按钮 3. 选择手机号并确认
预期结果	1. 调用 <code>getPhoneNumber</code> 获取手机号 2. 登录成功后跳转首页 3. 用户手机号已保存
实际结果	符合
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-USER-003

项目	内容
模块名称	用户模块-首次登录自动创建用户
测试目的	验证首次登录时自动创建用户记录
预置条件	全新用户，数据库中无该 <code>openId</code> 记录
测试步骤	1. 首次登录小程序 2. 授权登录 3. 查看数据库 <code>user</code> 表
预期结果	1. 登录成功 2. 数据库 <code>user</code> 表新增一条记录 3. 记录包含 <code>openId</code>、<code>createTime</code>
实际结果	符合
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-USER-004

项目	内容
模块名称	用户模块-非首次登录直接拉取数据
测试目的	验证已注册用户再次登录时直接拉取已有数据
预置条件	用户已注册且有药品数据
测试步骤	1. 退出登录后重新登录 2. 查看首页和药物列表
预期结果	1. 登录后直接进入首页 2. 用户之前的药品数据正常显示
实际结果	符合
结论	☒ 通过 ☐ 失败

药品录入模块-拍照录入测试用例

用例编号：TC-MED-001

项目	内容
模块名称	药品录入-拍照录入（正常流程）
测试目的	验证用户可以通过拍照正常录入药品
预置条件	用户已登录，相机权限已授予
测试步骤	1. 首页点击“拍照录入”按钮 2. 拍摄清晰的药品包装照片 3. 确认识别结果 4. 补充有效期等信息 5. 点击保存

项目	内容
预期结果	1. 成功调用相机 2. AI 识别出药品名称 3. 保存成功后跳转药物列表 4. 列表中显示新录入的药品
实际结果	符合
结论	☐ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-002

项目	内容
模块名称	药品录入-拍照录入（AI 识别失败）
测试目的	验证 AI 识别失败时用户可以手动补填
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 拍摄模糊或非药品照片 2. 等待识别结果 3. 手动填写药品名称等信息 4. 点击保存
预期结果	1. AI 识别失败提示“无法识别，请手动填写” 2. 可手动填写所有字段 3. 保存成功后正常录入
实际结果	符合
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-003

项目	内容
模块名称	药品录入-拍照录入（取消拍照）
测试目的	验证用户取消拍照时正确返回
预置条件	用户已登录

项目	内容
测试步骤	1. 点击“拍照录入”按钮 2. 调用相机后点击取消/返回
预期结果	1. 返回首页 2. 无异常弹窗 3. 不产生无效数据
实际结果	符合
结论	☒ 通过 ☐ 失败

药品录入模块-语音录入测试用例

用例编号：TC-MED-004

项目	内容
模块名称	药品录入-语音录入（正常流程）
测试目的	验证用户可以通过语音正常录入药品
预置条件	用户已登录，录音权限已授予
测试步骤	1. 首页点击“语音录入”按钮 2. 说出药品名称和有效期 3. 确认转文字结果 4. 补充信息后保存
预期结果	1. 成功调用同声传译插件 2. 语音转文字正确 3. 保存成功后药品列表更新
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-005

项目	内容
模块名称	药品录入-语音录入（识别不准确）
测试目的	验证语音识别不准确时用户可以编辑修正
预置条件	用户已登录

测试步骤	1. 说出模糊或生僻的药品名称 2. 查看转文字结果 3. 手动编辑修正 4. 保存
预期结果	1. 转文字结果显示 2. 用户可以编辑所有字段 3. 按修正后内容保存成功
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

药品录入模块-手动录入测试用例

用例编号：TC-MED-006

项目	内容
模块名称	药品录入-手动录入（正常流程）
测试目的	验证用户可以通过表单手动录入药品
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 首页点击“手动录入”按钮 2. 填写所有必填项（药品名称、有效期、包装类型、数量） 3. 选择是否已开封 4. 点击保存
预期结果	1. 保存成功 2. 跳转药物列表 3. 列表中显示新录入药品
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-007

项目	内容
模块名称	药品录入-手动录入（必填项校验）
测试目的	验证必填项未填写时给出提示

项目	内容
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 进入手动录入页 2. 不填写药品名称，点击保存 3. 不填写有效期，点击保存 4. 不填写包装类型，点击保存
预期结果	1. 每次点击保存时，未填写的必填项标红 2. toast 提示“请填写 xxx” 3. 无法保存成功
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-008

项目	内容
模块名称	药品录入-手动录入（有效期格式校验）
测试目的	验证有效期格式校验正确
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 输入格式错误的日期如“2026/13/01” 2. 输入过去的日期如“2020-01-01” 3. 点击保存
预期结果	1. 格式错误提示“请选择正确日期” 2. 过去日期允许录入但会在列表中标识过期
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

药品管理模块测试用例

用例编号：TC-MED-009

项目	内容
模块名称	药品管理-药品列表展示

项目	内容
测试目的	验证药品列表按有效期倒序正确展示
预置条件	用户已录入多款药品，有效期各不相同
测试步骤	1. 进入药物列表页 2. 查看药品排序 3. 检查每个药品的状态标识
预期结果	1. 药品按有效期从近到远排序 2. 已过期药品显示红色“已过期 X 天” 3. 临期药品显示橙色“剩余 X 天” 4. 正常药品显示绿色“剩余 X 天”
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-010

项目	内容
模块名称	药品管理-筛选功能
测试目的	验证筛选标签功能正确
预置条件	用户有已过期、临期、正常、未开封、已开封等各类药品
测试步骤	1. 点击“已过期”筛选 2. 点击“3 天内过期”筛选 3. 点击“未开封”筛选 4. 点击“已开封”筛选 5. 点击“全部”筛选
预期结果	1. 每次筛选只显示符合条件的药品 2. 筛选标签高亮 3. 无数据时显示空状态
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-011

项目	内容
模块名称	药品管理-搜索功能

项目	内容
测试目的	验证可以通过药品名称搜索
预置条件	用户有多款药品，包含“红霉素软膏”“阿莫西林胶囊”等
测试步骤	1. 在搜索框输入“红霉素” 2. 查看搜索结果 3. 输入不存在的关键词“不存在” 4. 清空搜索框
预期结果	1. 输入“红霉素”后显示包含该词的药品（防抖 500ms） 2. 输入“不存在”后显示空状态 3. 清空后恢复全部列表
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-012

项目	内容
模块名称	药品管理-查看详情
测试目的	验证点击药品卡片进入详情页
预置条件	用户有药品数据
测试步骤	1. 点击任意药品卡片 2. 查看详情页信息
预期结果	1. 跳转到药品详情页 2. 显示药品完整信息（名称、有效期、开封状态、数量、备注等）
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-013

项目	内容
模块名称	药品管理-编辑药品
测试目的	验证可以编辑已录入的药品信息
预置条件	用户有药品数据
测试步骤	1. 长按药品卡片

项目	内容
	2. 选择“编辑” 3. 修改药品名称或有效期 4. 保存
预期结果	1. 弹出编辑表单 2. 修改后保存成功 3. 列表中显示更新后的信息 4. 剩余天数重新计算
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-MED-014

项目	内容
模块名称	药品管理-删除药品
测试目的	验证删除药品时有确认弹窗
预置条件	用户有药品数据
测试步骤	1. 长按药品卡片 2. 选择“删除” 3. 弹窗中点击“取消” 4. 再次删除，点击“确认”
预期结果	1. 弹出确认弹窗“确定删除该药品吗？” 2. 点击取消，药品不删除 3. 点击确认，药品删除，列表刷新
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

预警模块测试用例

用例编号：TC-ALERT-001

项目	内容
模块名称	预警-首页风险卡片

项目	内容
测试目的	验证首页正确展示过期/临期药品数量
预置条件	用户有：2 个过期药品、3 个临期药品、5 个正常药品
测试步骤	1. 进入首页 2. 查看风险卡片数据
预期结果	风险卡片显示“过期 2 种药品”“临期 3 种药品”
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-ALERT-002

项目	内容
模块名称	预警-点击卡片跳转筛选
测试目的	验证点击风险卡片跳转到对应的筛选列表
预置条件	用户有临期药品
测试步骤	1. 点击“优先处理卡片”或“临期 X 种” 2. 查看跳转后的页面
预期结果	跳转到药物列表页，并自动筛选“临期”状态
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-ALERT-003

项目	内容
模块名称	预警-剩余天数计算准确性
测试目的	验证剩余天数计算正确
预置条件	假设当前日期为 2026-06-12
测试步骤	1. 录入有效期 2026-06-10 的药品 2. 录入有效期 2026-06-13 的药品 3. 录入有效期 2026-06-15 的药品 4. 查看各药品的剩余天数显示
预期结果	1. 2026-06-10：显示“已过期 2 天”（红色）

项目	内容
	2. 2026-06-13: 显示“剩余 1 天”（橙色-临期） 3. 2026-06-15: 显示“剩余 3 天”（橙色-临期，边界） 4. 2026-06-16: 显示“剩余 4 天”（绿色-正常）
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

AI 助手模块测试用例

用例编号：TC-AI-001

项目	内容
模块名称	AI 助手-页面加载默认建议
测试目的	验证 AI 助手页加载时自动展示基于药箱的建议
预置条件	用户已登录且有药品数据
测试步骤	1. 进入 AI 助手页 2. 查看页面内容
预期结果	自动展示“哪些药快过期了？”“过期药品如何处理？”等默认建议
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-AI-002

项目	内容
模块名称	AI 助手-提问功能
测试目的	验证用户提问后 AI 能基于药箱回答
预置条件	用户有药品“红霉素软膏（有效期 2026-06-15）”“阿莫西林（已过期）”
测试步骤	1. 输入“哪些药快过期了？” 2. 点击发送 3. 输入“过期药品怎么处理？” 4. 点击发送

项目	内容
预期结果	1. 显示“AI 正在思考...”加载动画 2. 回答中应提及用户药箱中的具体药品 3. 返回后发送按钮恢复可用 4. 支持对话历史滚动查看
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-AI-003

项目	内容
模块名称	AI 助手-推荐问题按钮
测试目的	验证点击推荐问题自动填充并发送
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 点击推荐问题按钮（如“哪些药快过期了？”）
预期结果	1. 输入框自动填充该问题 2. 自动发送并得到回答
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-AI-004

项目	内容
模块名称	AI 助手-点击药品名跳转
测试目的	验证 AI 回答中的药品名可点击跳转详情
预置条件	AI 回答中提及了用户药箱中的药品
测试步骤	1. 查看 AI 回答 2. 点击回答中的药品名称
预期结果	跳转到该药品的详情页
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-AI-005

项目	内容
模块名称	AI 助手-空药箱状态
测试目的	验证用户无药品时 AI 的回答
预置条件	用户无任何药品数据
测试步骤	1. 进入 AI 助手页 2. 提问“哪些药快过期了？”
预期结果	AI 回答“您还没有录入药品，请先在首页录入药品”或类似提示
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

个人中心模块测试用例

用例编号：TC-PROFILE-001

项目	内容
模块名称	个人中心-数据统计
测试目的	验证总录入药品数和今日提醒数正确展示
预置条件	用户已录入 15 种药品，其中今日有提醒的 9 种
测试步骤	1. 进入个人中心页 2. 查看统计数据
预期结果	显示“总录入药品 15 种”“今日提醒 9 种”
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-PROFILE-002

项目	内容
模块名称	个人中心-更换头像
测试目的	验证用户可以更换头像
预置条件	用户已登录

项目	内容
测试步骤	1. 点击用户头像 2. 选择相册图片或拍照 3. 确认更换
预期结果	头像更换成功并保存
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-PROFILE-003

项目	内容
模块名称	个人中心-退出登录
测试目的	验证退出登录功能
预置条件	用户已登录
测试步骤	1. 点击“退出登录” 2. 弹窗中点击“取消” 3. 再次点击“退出登录”，点击“确认”
预期结果	1. 弹出确认对话框 2. 取消后留在个人中心 3. 确认后清除本地 storage，跳转登录页
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

边界与异常测试用例

用例编号：TC-EXCEPTION-001

项目	内容
模块名称	异常测试-无网络状态
测试目的	验证无网络时给出友好提示
预置条件	手机断开网络

项目	内容
测试步骤	1. 打开小程序 2. 尝试登录 3. 尝试获取药品列表
预期结果	toast 提示“网络异常，请稍后重试”
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-EXCEPTION-002

项目	内容
模块名称	异常测试-网络请求中防重复提交
测试目的	验证网络请求时禁止重复点击
预置条件	用户已登录，网络正常
测试步骤	1. 进入药品列表页 2. 在请求未返回时快速多次点击筛选标签
预期结果	请求期间显示 loading，重复点击无效，只发起一次请求
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-EXCEPTION-003

项目	内容
模块名称	异常测试-大量数据性能
测试目的	验证药品数量多时列表渲染性能
预置条件	用户录入 100 条药品数据
测试步骤	1. 进入药物列表页 2. 快速滚动列表 3. 使用筛选和搜索功能
预期结果	1. 列表加载时间不超过 3 秒 2. 滚动流畅无卡顿

项目	内容
	3. 筛选和搜索响应正常
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-EXCEPTION-004

项目	内容
模块名称	异常测试-权限拒绝
测试目的	验证用户拒绝相机/录音权限时的处理
预置条件	用户拒绝相机权限
测试步骤	1. 点击“拍照录入” 2. 拒绝录音权限后点击“语音录入”
预期结果	提示“需要相机/录音权限，请在设置中开启”，引导用户去设置
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

兼容性测试用例

用例编号：TC-COMPAT-001

项目	内容
模块名称	兼容性-操作系统版本
测试目的	验证小程序在不同 iOS/Android 版本上正常运行
预置条件	准备多台测试设备
测试设备	iPhone 12 (iOS 16)、iPhone 14 (iOS 17)、小米 13 (Android 13)、华为 P40 (Android 12)、OPPO (Android 11)
测试	1. 在每台设备上安装小程序

项目	内容
步骤	2. 执行核心功能：登录、拍照录入、语音录入、AI 问答
预期结果	所有设备上功能正常运行，无崩溃或显示异常
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

用例编号：TC-COMPAT-002

项目	内容
模块名称	兼容性-不同屏幕尺寸
测试目的	验证小程序在不同屏幕尺寸上 UI 显示正常
预置条件	不同尺寸的设备（小屏 iPhone SE、大屏 iPhone Pro Max、各类安卓）
测试步骤	1. 在各设备上打开小程序 2. 检查各页面布局是否错位、文字是否截断 3. 检查药品卡片、筛选标签等 UI 元素
预期结果	所有屏幕尺寸上布局正常，无元素重叠或超出屏幕
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

安全性测试用例

用例编号：TC-SEC-001

项目	内容
模块名称	安全性-用户数据隔离
测试目的	验证用户 A 不能看到用户 B 的药品数据

项目	内容
预置条件	用户 A 和用户 B 各有不同药品数据
测试步骤	1. 用户 A 登录，记录其药品数据 2. 用户 B 登录，查看药品列表 3. 通过技术手段尝试修改 userId 调用云函数
预期结果	用户 B 的列表中不包含用户 A 的任何药品数据 云函数应校验 userId 与 token/openId 的匹配性
实际结果	符合预期
结论	☒ 通过 ☐ 失败

测试报告

测试概述

项目	内容
测试系统	药物预警小程序
测试版本	V1.0
测试周期	2026 年 3 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 20 日
测试人员	测试组
测试环境	iOS 16/17、Android 11/12/13、微信 8.0.40+

测试范围

本次测试覆盖了以下模块：

- ✔ 用户模块（登录、注册）
- ✔ 药品录入模块（拍照、语音、手动）
- ✔ 药品管理模块（列表、筛选、搜索、编辑、删除）
- ✔ 预警模块（风险卡片、剩余天数计算）
- ✔ AI 助手模块（问答、建议）

- ✔ 个人中心模块（统计、设置、退出）
- ✔ 兼容性测试
- ✔ 边界与异常测试✔ 安全性测试

3. 测试执行情况

统计项	数量	说明
计划执行用例数	32	
实际执行用例数	32	执行率 100%
通过用例数	30	
失败用例数	2	
阻塞用例数	0	
用例通过率	93.75%	略低于 95%目标

缺陷统计

缺陷级别	发现数量	已修复	未修复	备注
4 级-致命	0	0	0	
3 级-严重	1	1	0	AI 识别有时返回空结果
2 级-一般	4	3	1	语音录入在嘈杂环境识别率低
1 级-提示	3	2	1	UI 文字对齐问题
合计	8	6	2	

遗留问题清单

编号	问题描述	严重级别	影响范围	处理建议
BUG-002	嘈杂环境下语音录入识别准确率较低	2 级-一般	语音录入功能	增加手动编辑入口，或提示用户在安静环境使用
BUG-005	部分安卓机型上筛选标签高亮显示不明显	1 级-提示	筛选功能	下版本优化 UI 配色

测试结论

测试维度	结论	说明
功能测试	✔ 通过	核心功能均正常实现，登录、录入、管理、预警、AI 问答流程完整
界面与易用性	✔ 通过	界面一致性良好，交互反馈符合预期
兼容性测试	✔ 通过	iOS/Android 主流版本均正常运行，UI 适配良好
边界与异常	基本通过	语音录入在特殊环境下有优化空间，已记录改进
安全性测试	✔ 通过	用户数据隔离有效

总体结论：

系统核心功能稳定，用户体验良好，无致命或严重级别遗留问题。**建议通过测试，可以发布上线。**遗留问题已在缺陷清单中记录，建议在后续版本迭代中优化。

改进意见

序号	问题	改进建议	优先级
1	语音录入在嘈杂环境识别率低	建议增加手动编辑入口作为备选，或提示用户在安静环境使用	高
2	AI 识别有时返回空结果	优化 AI 模型超时和重试机制，增加降级方案	中
3	部分安卓机型筛选标签高亮不明显	优化 UI 配色方案，提高对比度	低
4	药品数量较多时首屏加载略慢	考虑增加分页加载，首屏只加载前 20 条	中
5	无药品数据时各页面空状态可更友好	增加引导图示和文案，引导用户录入第一盒药	低

